



POLSKI

ENGLISH

MATERAC PRZECIWODLEŻYŃOWY

UWAGA: PRZED UŻYTKOWANIEM PRODUKTU NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ ULOTKI ORAZ SPRAWDZIĆ CZY NA WYROBIE NIE POJAWIŁY SIĘ PRZETARCIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW I SZWÓW. TYLKO NIEUSZKODZONY WYRÓB ORAZ JEGO PRAWIDŁOWE UŻYWANIE GWARANTUJE JEGO WŁAŚCIWE FUNKCJONOWANIE. PONIŻSZE INFORMACJE O PRODUKCIE NALEŻY ZACHOWAĆ, ABY W PÓŹNIEJSZYM CZASIE MÓC PONOWNIE KORZYSTAĆ Z INSTRUKCJI.

OPIS PRODUKTU:

Materac został specjalnie zaprojektowany, aby zapewnić poczucie komfortu podczas jego użytkowania. Materac doskonale sprawdza się w terapii przeciwodleżynowej. Produkty Reh4Mat to wyroby nowoczesne i innowacyjne, wykonywane z ogromną starannością z najwyższej jakości materiałów. Naszym kluczowym celem jest uzyskanie satysfakcji klientów.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub bezpośrednio z pracownikiem Reh4Mat za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@reh4mat.com.

WAŻNE:

- W przypadku wystąpienia zmian skórnych lub uczulenia należy skontaktować się z lekarzem.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE:

- Nie prać,
 - Nie prasować,
 - Nie chlorować,
 - Nie prać chemicznie,
 - Nie suszyć w suszarce bębnowej,
 - Chronić przed wilgocią,
 - Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury,
 - Suszyć z daleka od źródła ciepła.
- W celu dezynfekcji pokrowca należy spryskać powierzchnię pokrowca środkiem dezynfekcyjnym, pozostawić na czas działania środka, po czym pokrowiec należy zmyć wodą i wysuszyć. Pokrowiec należy dezynfekować środkami dezynfekcyjnym. Substancje czynne i ich maksymalne stężenia: 2-propanol (35%), 1-propanol (25%), etanol (10%), chlorek benzyloalkilamonowy (0,2%), glukoprotamina (25%).

UWAGA: Materac należy stosować w pokrowcu.

ANTI-BEDSORE MATTRESS

ATTENTION: BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTION COMPLETELY AND CAREFULLY AND CHECK IF MATTRESS'S ELEMENTS AND SEAMS ARE SEEDY. ONLY UNDAMAGED DEVICE AND ITS CORRECT USING ARE VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF IT. SAVE THE PRODUCT INFORMATION, TO BE ABLE TO REREAD THE INSTRUCTION LATER.

PRODUCT DESCRIPTION:

Mattress is specially designed to provide user comfort. Mattress is an excellent solution for anti bedsores therapy. Reh4Mat products are innovative and are carefully made of the high quality materials. Our key objective is customer's satisfaction. In case of any questions feel free to contact with us by e-mail: biuro@reh4mat.com.

IMPORTANT:


- In case of skin lesions occurring and allergic reaction it is necessary to contact with physician.

CARE AND MAINTENANCE:

- Do not wash,
 - Do not iron,
 - Do not chlorinate,
 - Do not dry clean,
 - Do not tumble dry,
 - Protect from moisture,
 - Protect from high temperatures,
 - Dry away from sources of warmth
- To disinfect the cover spray the surface of the device with disinfectant, leave it for disinfectant's activation, then wash it by water and dry it. The cover should be disinfected by disinfectant. The active substances and their maximum concentration: 2-propanol (35%), 1-propanol (25%), ethanol (10%) alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride (0,2%), glucoprotamine(25%).

ATTENTION: Mattress should be used with a cover.

ul. Truskawkowa 17, Widna Góra, 37-500 Jarosław, POLAND
tel: +48 (016) 621 42 20
tel: +48 (016) 621 41 35, fax: +48 (016) 621 42 13
Mailing address/Adres mailowy:
biuro@reh4mat.com
www.reh4mat.com
Producent posiada certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485
The company holds the ISO 13485 International quality management system certificate
DATA AKTUALIZACJI / THE UPDATE DATE OF THE INSTRUCTION: 16.05.2016

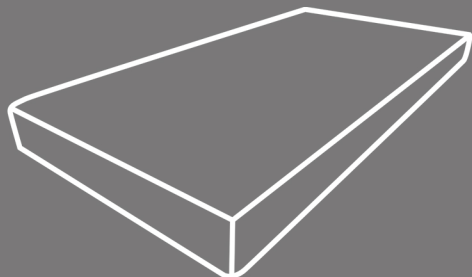

MATERAC PRZECIWODLEŻYŃOWY
ANTI-BEDSORE MATTRESS

UWAGA: STOSOWANIE WYROBU NIEZGODNIE Z ZASADAMI INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA MOŻE GROZIĆ POWAŻNYMI POWIKŁANIAMI.

ATTENTION: USING OF THE DEVICE NOT ACCORDING TO THE MANUAL MAY CAUSE SERIOUS COMPLICATIONS.