



POLSKI

ENGLISH

ul. Truskawkowa 17, Widna Góra, 37-500 Jarosław, POLAND
 tel: +48 (016) 621 42 20
 tel: +48 (016) 621 41 35, fax: +48 (016) 621 42 13
 Mailing address / Adres mailowy:
 biuro@reh4mat.com
 www.reh4mat.com; www.ortezy.pl
 Producent posiada certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485
 The company holds the ISO 13485 international
 quality management system certificate
 DATA AKTUALIZACJI / THE UPDATE DATE OF THE
 INSTRUCTION: 27.04.2016

PODUSZKA

UWAGA: PRZED UŻYTKOWANIEM PRODUKTU NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ ULOTKI ORAZ SPRAWDZIĆ CZY NA WYROBIE NIE POJAWIŁY SIĘ PRZETARCIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW I SZWÓW. TYLKO NIEUSZKODZONY WYRÓB ORAZ JEGO PRAWIDŁOWE UŻYWANIE GWARANTUJE JEGO WŁAŚCIWE FUNKCJONOWANIE. PONIŻSZE INFORMACJE O PRODUKCIE NALEŻY ZACHOWAĆ, ABY W PÓŹNIEJSZYM CZASIE MÓC PONOWNIE KORZYSTAĆ Z INSTRUKCJI.

OPIS PRODUKTU:

Poduszka została specjalnie zaprojektowana, aby zapewnić poczucie komfortu podczas jej użytkowania. Poduszka doskonale sprawdza się w terapii przeciwoleźynowej. Produkty Reh4Mat to wyroby nowoczesne i innowacyjne, wykonywane z ogromną starannością z najwyższej jakości materiałów. Naszym kluczowym celem jest uzyskanie satysfakcji klientów.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub bezpośrednio z pracownikiem Reh4Mat za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@reh4mat.com.

WAŻNE:

- W przypadku wystąpienia zmian skórnych lub uczulenia należy skontaktować się z lekarzem.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE:

- Pokrowiec czyścić regularnie łagodnym detergentem z użyciem gąbki lub miękkiej szczotki, na koniec przetrzeć czyszczone miejsce wilgotną szmatką po czym wytrzeć do sucha,
- Do dezynfekcji pokrowca stosować ogólnodostępne środki do dezynfekcji,
- Nie prać poduszki,
- Nie prasować,
- Nie chlorować,
- Nie prać chemicznie,
- Nie suszyć w suszarce bębnowej,
- Chronić przed wilgocią,
- Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury,
- Suszyć z daleka od źródła ciepła.

UWAGA: Poduszkę należy stosować w pokrowcu.

CUSHION

ATTENTION: BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTION COMPLETELY AND CAREFULLY AND CHECK IF PRODUCT'S ELEMENTS AND SEAMS ARE SEEDY. ONLY UNDAMAGED DEVICE AND ITS CORRECT USING ARE VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF IT. SAVE THE PRODUCT INFORMATION, TO BE ABLE TO REREAD THE INSTRUCTION LATER.

PRODUCT DESCRIPTION:

Cushion is specially designed to provide user comfort. Cushion is an excellent solution for anti bedsores therapy. Reh4Mat products are innovative and are carefully made of the high quality materials. Our key objective is customer's satisfaction. In case of any questions feel free to contact with us by e-mail: biuro@reh4mat.com.



IMPORTANT:

- In case of skin lesions occurring and allergic reaction is it necessary to contact with physician.


CARE AND MAINTENANCE:

- Cushion cover should be cleaned regularly with mild detergent with a sponge or soft brush, after that it should be wiped by damp cloth and then wiped dry,
- To disinfection the cover use widely available disinfectant,
- Do not wash cushion,
- Do not iron,
- Do not chlorinate,
- Do not dry clean,
- Do not tumble dry,
- Protect from moisture,
- Protect from high temperatures,
- Dry away from sources of warmth.

ATTENTION: Cushion should be used with a cover.

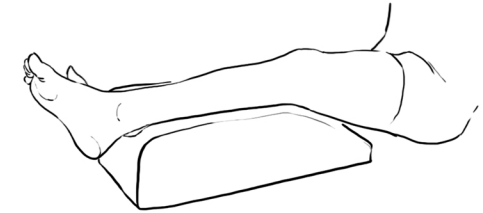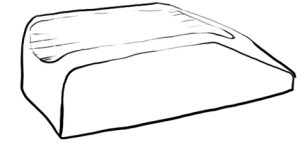

REH4MAT
 MANUFACTURER OF MODERN ORTHOPAEDIC BRACES

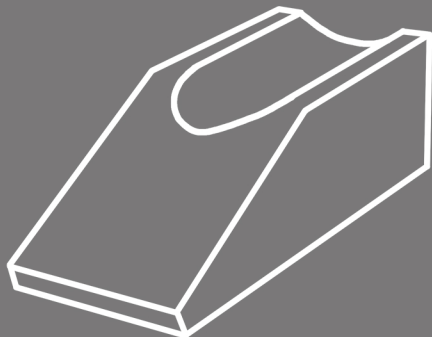

PODUSZKA
 CUSHION

UWAGA: STOSOWANIE WYROBU NIEZGODNIE Z ZASADAMI INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA MOŻE GROZIĆ POWAŻNYMI POWIKŁANIAMI.

ATTENTION: USING OF THE DEVICE NOT ACCORDING TO THE MANUAL MAY CAUSE SERIOUS COMPLICATIONS.