


KOD KATALOGOWY	AM-OP-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA STOPY
MODEL	ORTEZA STOPY AM-OP-02
CODE	AM-OP-02
TRADE NAME	FOOT ORTHOSIS
MODEL	FOOT ORTHOSIS AM-OP-02



- 1. PL:** Połóż nogę na ortezie w taki sposób, aby staw MTP znajdował się w otworze szyny aluminiowej.
EN: Place your foot on the brace so that MTP joint would be placed in the splint hole.



- 2. PL:** Zapnij pasek śródstopia (1) według wskazanego kierunku.
EN: Fasten the strap metatarsal (1) according to the indicated direction.

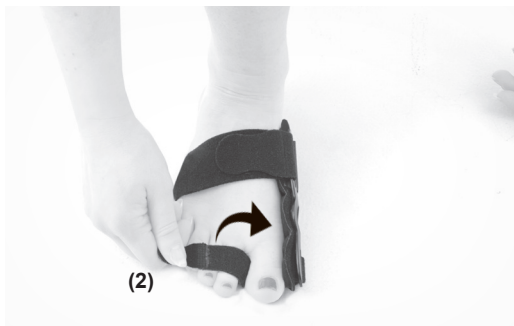

- 3. PL:** Przepleć pasek palucha (2) przez otwór szyny i następnie zapnij według wskazanego kierunku.
EN: Insert the hallux strap (2) through the splint hole and fasten it according to the indicated direction.



- 4. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.

