




THE BOA®
GUARANTEE

**FAST.
EFFORTLESS.
PRECISION FIT.**

The BOA® Fit System System Kompresyjny

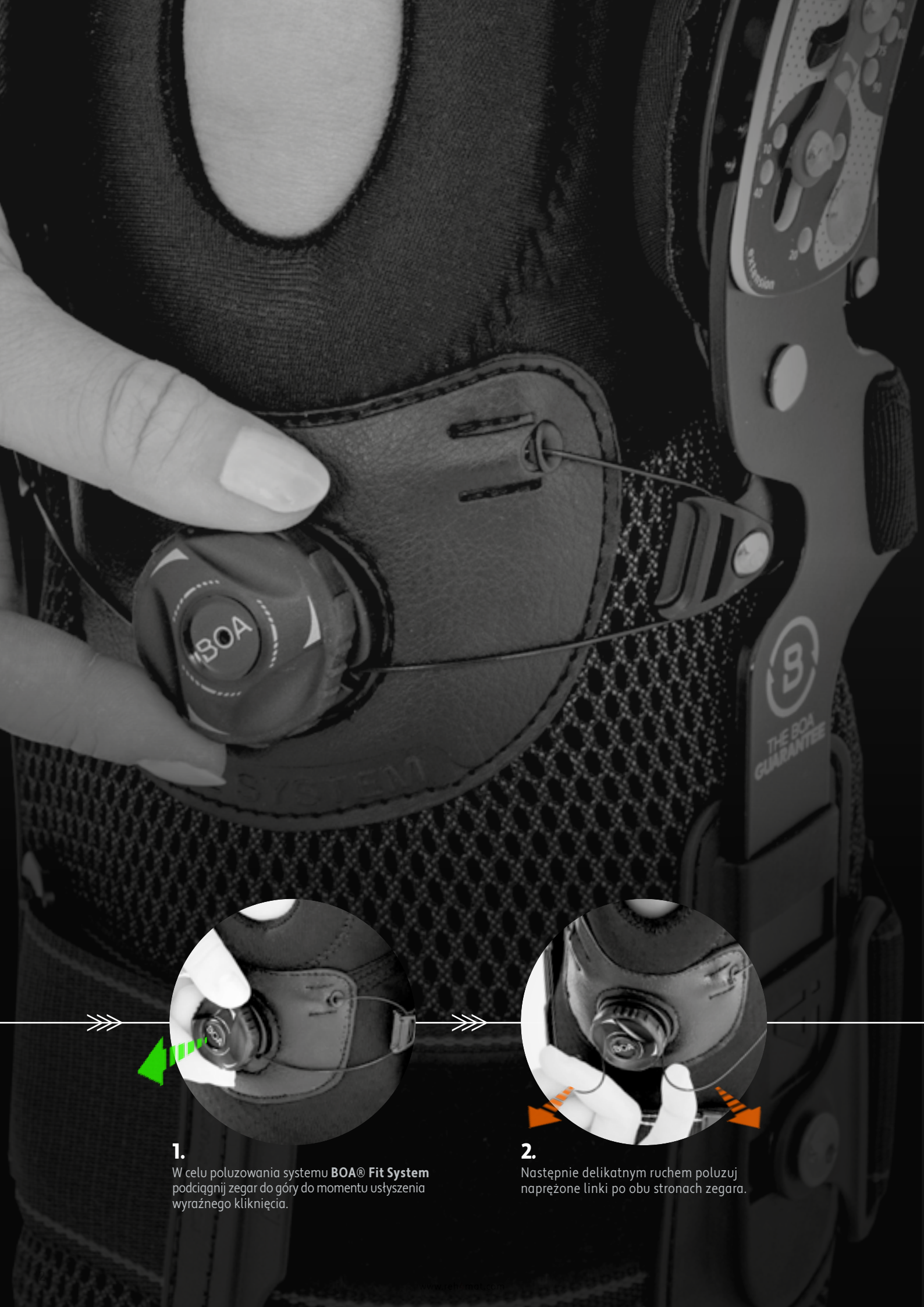

- 1.**
W celu poluzowania systemu **BOA® Fit System** podciągnij zegar do góry do momentu usłyszenia wyraźnego kliknięcia.



- 2.**
Następnie delikatnym ruchem poluzuj naprężone linki po obu stronach zegara.




POŁĄCZENIE zapewnia lepszą kontrolę nad idealnym dopasowaniem wyrobu do ciała.

SZYBKOŚĆ umożliwia szybką aplikację sprzętu, bez względu na warunki.

MIKRODOPASOWANIE umożliwia precyzyjne dopasowanie produktu. Poprawia wydajność i komfort - zawsze i wszędzie.

TRWAŁOŚĆ zaprojektowany z wysokiej jakości, trwałych materiałów i testowany w terenie **BOA® Fit System** gwarantuje działanie w każdym środowisku.

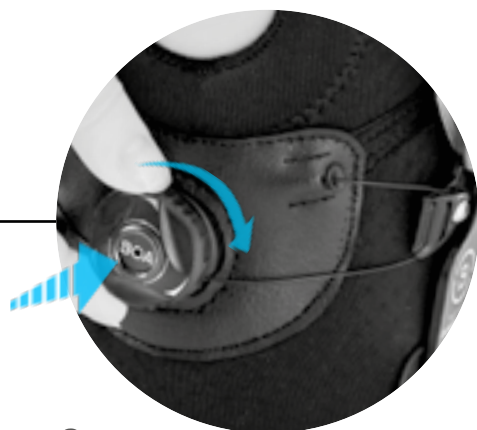

3.

W celu napięcia systemu **BOA® Fit System** przekręć zegar zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do uzyskania wymaganego poziomu kompresji wyrobu. W niektórych zegarach napięcie uzyskuje się przekręcając zegar w przeciwną stronę.

W przypadku, gdy w trakcie zakręcania zegara wystąpi opór, a orteza nie osiągnie jeszcze właściwej kompresji, należy zaniechać dalszego zakręcania zegara i wymienić wyrób na mniejszy rozmiar.

UWAGA!

Próba dalszego zakręcania systemu **BOA® Fit System** pomimo oporu, może spowodować TRWAŁE uszkodzenie mechanizmu wyrobu!



ORTEZY STAWU SKOKOWEGO <<<



Produkt refundowany
Kod NFZ: J.036.00, J.036.01.

AM-OSS-03/CCA 


Naszą ortezę stabilizującą można stosować zarówno jako zaopatrzenie pourazowe jak i profilaktycznie. Orteza występuje także w wersji dla dorosłych.

WSKAZANIA

- skrećenia i zwicnięcia stawu skokowego
- nawykowe zwicnięcia stawu skokowego
- doleczenia po unieruchomieniu gipsowym
- uszkodzenie więzadeł i tkanek miękkich stawu skokowego

ZALETY

- wysoka kompresja
- gwarancja jakości
- innowacyjność
- łatwość zakładania
- stabilizacja

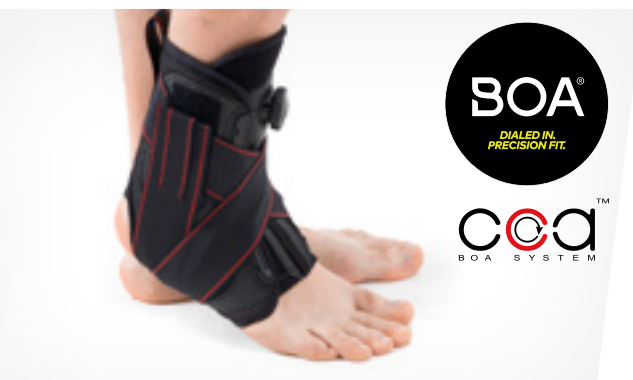

Produkt refundowany
Kod NFZ: J.036.00, J.036.01.

AM-OSS-03/CCA

Naszą ortezę stabilizującą można stosować zarówno jako zaopatrzenie pourazowe jak i profilaktycznie.

WSKAZANIA

- skrećenia i zwicnięcia stawu skokowego
- nawykowe zwicnięcia stawu skokowego
- doleczenia po unieruchomieniu gipsowym
- uszkodzenie więzadeł i tkanek miękkich stawu skokowego

ZALETY

- wysoka kompresja
- gwarancja jakości
- innowacyjność
- łatwość zakładania
- stabilizacja





AM-OSS-05/CCA

Bestsellerowa orteza kostki **AM-OSS-05/CCA** to kompaktowe rozwiązanie dla stabilizacji stawu skokowego. Bezpieczna i skuteczna.

WSKAZANIA

- o skręcenia i zwichnięcia stawu skokowego
- o nawykowe zwichnięcia stawu skokowego
- o doleczenia po unieruchomieniu gipsowym
- o uszkodzenie więzadeł i tkanek miękkich stawu skokowego

ZALETY

- o wysoka kompresja
- o gwarancja jakości
- o innowacyjność
- o łatwość zakładania
- o stabilizacja



ORTEZA STAWU SKOKOWEGO



BOCZNE ANATOMICZNE WZMOCNIENIA



ER



WOLNY OD LATEKSU



INNOWACYJNY



POLECANY PRZEZ SPECJALISTÓW



ÓSEMKOWE PASY KRZYŻOWE



DWUSTRONNOŚĆ



WYRÓB MEDYCZNY KL. I



Produkt refundowany
Kod NFZ: J.036.00, J.036.01.

>>> ORTEZY NA OPADAJĄCĄ STOPE

OSS-OS-02/CCA

Orteza stopy **OSS-OS-02/CCA** pomaga przywrócić utracone funkcje przez aktywne wspomaganie ruchu podnoszenia stopy u osób mających niedowład mięśni prostowników, w szczególności u osób z hemiplegią po udarze mózgu oraz u osób z zaburzeniami i zwyrodnieniami nerwów obwodowych.

WSKAZANIA

- o niedowład lub osłabienie prostowników stopy
- o stopa wiotka
- o stan po udarze lub wylewie mózgu
- o stwardnienie rozsiane
- o amputacja palców lub przedstopia

ZALETY

- o wysoka kompresja
- o gwarancja jakości
- o innowacyjność
- o łatwość zakładania
- o stabilizacja



ORTEZA STAWU SKOKOWEGO



OPADAJĄCA STOPA



INNOWACYJNY



SZEROKI ZAKRES REGULACJI



POLECANY PRZEZ SPECJALISTÓW



MINIMUM WYROBU MAXIMUM EFEKTU



WYRÓB MEDYCZNY KL. I



Produkt refundowany
Kod NFZ: J.036.00, J.036.01.

AM-OSS-21/CCA

Orteza AM-OSS-21/CCA to doskonały produkt do stosowania w przypadku występowania dolegliwości opadającej stopy. Orteza jest lekka i wygodna. Zapewnia natychmiastowy efekt.

WSKAZANIA

- o niedowład lub osłabienie prostowników stopy (opadająca stopa)
- o stopa wiotka
- o stwardnienie rozsiane
- o cukrzyca
- o dystrofia mięśniowa
- o stan po udarze lub wylewie mózgu
- o mózgowo porażenie dziecięce (MPD)
- o uraz/zmiażdżenie podudzia

ZALETY

- o wysoka kompresja
- o gwarancja jakości
- o innowacyjność
- o łatwość zakładania



ORTEZA STAWU SKOKOWEGO



INNOWACYJNY



ROZMIAR UNIWERSALNY



MINIMUM WYROBU MAXIMUM EFEKTU



TRWAŁY



POLECANY PRZEZ SPECJALISTÓW



WYRÓB MEDYCZNY KL. I





ORTEZY KOŃCZINY DOLNEJ <<<



Produkt refundowany
Kod NFZ: J.038.00, J.038.01, J.039.00, J.039.01.

ATOM ACL/CCA

Orteza **ATOM ACL/CCA** stawia opór siłom działającym na koślawe lub szpotawe kolano, a także niweluje negatywny efekt przedniej translacji piszczeli (efekt szuflady). Wyjątkowo mocna przednio-przednia rama ortezy została wykonana z lekkiego lotniczego aluminium.

WSKAZANIA

- umiarkowana lub ciężka niestabilność ACL, PCL, MCL i LCL
- rehabilitacja po rekonstrukcji więzadeł ACL lub PCL
- urazy kombinowane ACL/PCL
- przeprost stawu kolanowego
- szpotawość i koślawość kolana

ZALETY

- najpewniejsza ochrona kolana
- precyzyjne dopasowanie wyrobu
- wodoodporność
- gwarancja jakości
- innowacyjność



ORTEZA KOLANA



24 TERAPIA



SZYNA ANATOMICZNA 2RA



IDEALNA DLA NARCIARZY



INNOWACYJNY



WODOODPORNY



WYRÓB MEDYCZNY KL. I



Produkt refundowany
Kod NFZ: J.039.00, J.039.01.

ACL CCA

Orteza przeznaczona jest do długotrwałego stosowania u pacjentów ze złożonymi niestabilnościami stawu kolanowego (częściowe lub całkowite uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego) będącego następstwem przebytych urazów (w okresie przed i pooperacyjnym).

WSKAZANIA

- uszkodzenia więzadła (ACL)
- uszkodzenia więzadeł: LCL, MCL i PCL
- niestabilność boczna kolana
- po rekonstrukcji więzadeł kolana
- po innych zabiegach operacyjnych

ZALETY

- wysoka kompresja
- gwarancja jakości
- innowacyjność
- łatwość zakładania



ORTEZA KOLANA



ANATOMICZNY PIERSIEŃ OKOŁORZEPKOWY



ER



INNOWACYJNY



ORTOPEDIA



PRZYJAZNY DLA SKÓRY



SYSTEM 2RA-ACL PRECISION




TRWAŁY



WYRÓB MEDYCZNY KL. I

ORTEZA KOLANA <<<

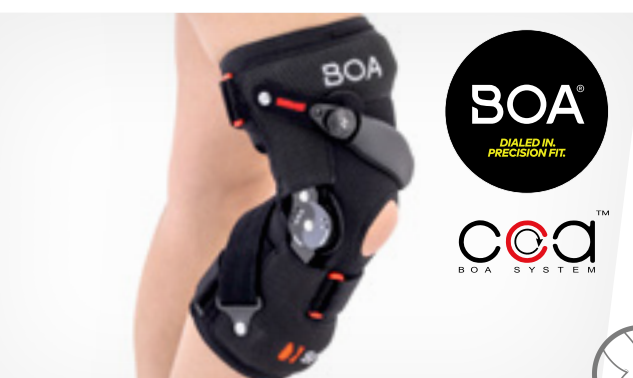

Produkt refundowany
Kod NFZ: J.038.00, J.038.01.

SPEEDERO/CCA

Jednoszynowa orteza kolana **SPEEDERO** to lekki, komfortowy produkt, który skutecznie zmniejsza dolegliwości bólowe kolana i pozwala opóźnić w czasie ewentualny zabieg operacyjny.

WSKAZANIA

- osteoporoza kolana
- skręcenie stawu kolanowego
- uszkodzenia więzadeł kolana (głównie MCL oraz ACL)
- rekonstrukcja więzadeł kolana
- zwichnięcia stawu kolanowego
- niestabilność boczna kolana
- po innych zabiegach operacyjnych
- jako zabezpieczenie w uprawianiu sportu

ZALETY

- 3 punktowy system podparcia
- lekkie i oddychające materiały
- regulacja zakresu ruchomości kolana
- łatwa i szybka aplikacja produktu



ORTEZA KOLANA



ORTOPEDIA



PRZYJAZNY DLA SKÓRY



INNOWACYJNY



SKUTECZNOŚĆ



ORTEZA OA



TRWAŁY



WYRÓB MEDYCZNY KL. I



>>> ORTEZA RĘKI I PRZEDRAMIENIA

AM-OSN-U-01/CCA

Orteza została wykonana z bardzo mocnych, ale oddychających materiałów, które w miejscach wyjątkowo narażonych na zniszczenie zostały dodatkowo pokryte specjalnie wzmocnioną ekologiczną skórą.

WSKAZANIA

- o niestabilność stawu nadgarstkowego
- o jako unieruchomienie po urazie nadgarstka (złamanie, zwichnięcie)
- o profilaktycznie w sporcie

ZALETY

- o bardzo mocne i oddychające materiały
- o precyzyjne dopasowanie wyrobu
- o wysoka kompresja
- o gwarancja jakości
- o łatwość zakładania



ORTEZA NADGARSTKA



ANATOMICZNA SZYNA DŁONIOWA



ODDYCHAJĄCY



ALTERNATYWA GIPSU



ZESPÓŁ CIĘŚNI NADGARSTKA



INNOWACYJNY



WOLNY OD LATEKSU



WYRÓB MEDYCZNY KL. I



Produkt refundowany

Kod NFZ: L.047.00, L.047.01, L.048.00, L.048.01.

>>> UNIWERSALNA ORTEZA ŁOKCIA

AM-SL-01/CCA

Sprawdzona i skuteczna forma terapii łokcia tenisisty i golfisty. Odciąga przyczepy mięśni i zmniejsza stan zapalny. Polecana przez Wiktora Chabela – olimpijczyka z Rio 2016.

WSKAZANIA

- o łokieć tenisisty
- o łokieć golfisty

ZALETY

- o wysoka kompresja
- o gwarancja jakości
- o innowacyjność
- o łatwość zakładania




ŁOKIEĆ TENISISTY/GOLFISTY



CCA



WYRÓB MEDYCZNY KL. I

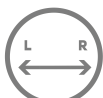

DWUSTRONNOŚĆ



SKUTECZNOŚĆ



INNOWACYJNY



DISKRECJA




PEŁOTA SILIKONOWA



ROZMIAR UNIWERSALNY



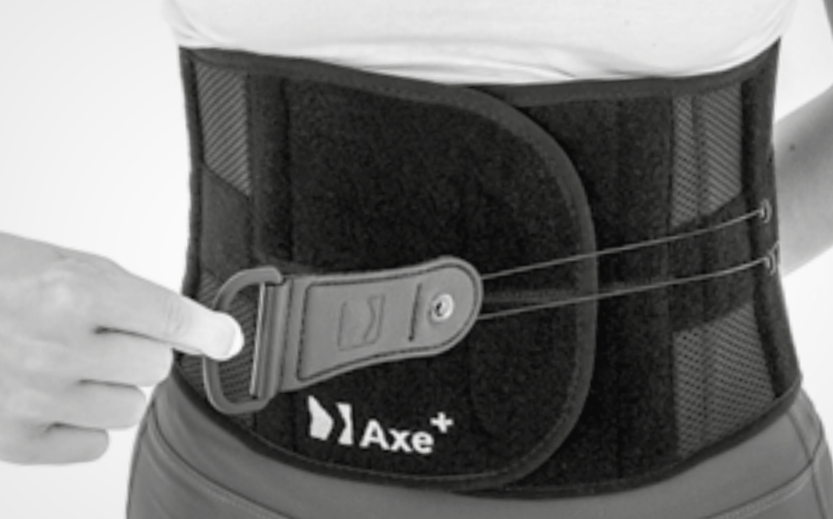

ORTEZY LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWE <<<



ccaTM
BOA SYSTEM

Produkt refundowany
Kod NFZ: M.060.00, M.060.01.

AS-LK-02/CCA

Pas sportowy **AXE** ma na celu odciążenie i stabilizację odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa oraz zabezpieczenie mięśni i więzadeł przed skręceniem. Produkt rekomendowany przez zespół futbolu amerykańskiego Rzeszów Rockets.

WSKAZANIA

- o po naderwaniu mięśni brzucha i grzbietu
- o u osób ze słabymi mięśniami brzucha
- o w przewlekłych zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowego

ZALETY

- o wysoka kompresja
- o gwarancja jakości
- o innowacyjność
- o łatwość zakładania



LSO



ODDYCHAJĄCY



SZEROKI ZAKRES REGULACJI



INNOWACYJNY



WOLNY OD LATEKSU



WYRÓB MEDYCZNY KL. I



ccaTM
BOA SYSTEM

Produkt refundowany
Kod NFZ: M.059.00, M.059.01.

AR-WSP-03/CCA

Orteza **AXE+** stabilizuje odcinek lędźwiowo-krzyżowy kręgosłupa oraz wzmacnia ścianę mięśni brzucha. Poprzez utrzymywanie stabilnej temperatury i elastyczny ucisk łagodzi dolegliwości bólowe spowodowane przeciążeniem, przebytymi urazami i zmianami zwyrodnieniowymi.

WSKAZANIA

- o naderwanie mięśni brzucha i grzbietu spowodowanym urazem lub przeciążeniem
- o przy słabych mięśniach brzucha, pracach fizycznych i aktywnościach fizycznych
- o w przewlekłych zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowego

ZALETY

- o wysoka kompresja
- o gwarancja jakości
- o innowacyjność
- o łatwość zakładania
- o stabilizacja



LSO



ODDYCHAJĄCY



SZEROKI ZAKRES REGULACJI



INNOWACYJNY




WOLNY OD LATEKSU



WYRÓB MEDYCZNY KL. I

ORTEZA KRZYŻOWO-BIODROWA <<<

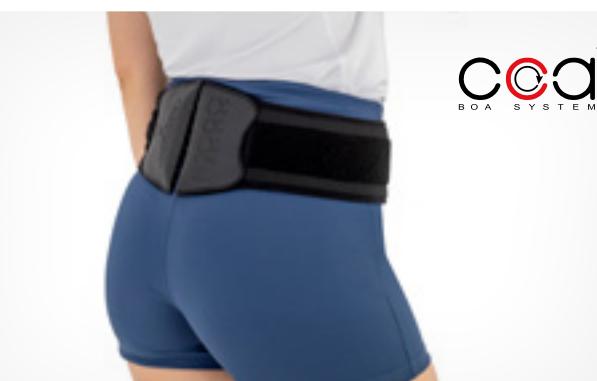

ccaTM
BOA SYSTEM

Produkt refundowany
Kod NFZ: M.058.00, M.058.01.

AM-OK/CCA

Doskonałym rozwiązaniem profilaktycznym oraz zmniejszającym dolegliwości bólowe jest nasza orteza **AM-OK/CCA**, która poprzez zastosowanie innowacyjnego systemu kompresyjnego **CCA**, pozycjonuje i doskonale odciąża stawy krzyżowo-biodrowe.

WSKAZANIA

- o artroza stawu krzyżowo-biodrowego
- o zespół stawu krzyżowo-biodrowego
- o niestabilności stawu krzyżowo-biodrowego
- o blokady stawu krzyżowo-biodrowego
- o profilaktyka

ZALETY

- o wysoka kompresja
- o gwarancja jakości
- o innowacyjność
- o łatwość zakładania
- o stabilizacja



LSO



ODDYCHAJĄCY



SZEROKI ZAKRES REGULACJI



INNOWACYJNY



WOLNY OD LATEKSU



WYRÓB MEDYCZNY KL. I



>>> ORTEZA KORYGUJĄCA SKOLIOZĘ

SCOLIOR **4kids**[®]
MEDICAL DEVICES

Orteza kręgosłupa **SCOLIOR**[™] składa się z 3 półsztywnych pelot, wyposażonych w profesjonalny system kompresyjny **BOA**[®] **Fit System** oraz system taśm korekcyjnych.

WSKAZANIA

- korekcja ustawienia kręgosłupa w sposób bierny
- bierna korekcja bocznych skrzywień kręgosłupa
- optymalizacja napięć mięśniowych
- zmniejsza i zatrzymuje progresję skoliozy

WSKAZANIA

- długotrwała terapia
- indywidualna kompresja
- skuteczność



ORTEZA TUŁOWIA



ORTOPEDIA



INNOWACYJNY



TRWAŁY



MINIMUM DEVICE
MAXIMUM EFFECT



SZEROKI ZAKRES
REGULACJI



DYSKRECJA



WYRÓB
MEDYCZNY KL. I



BOA[®] Fit System

System charakteryzuje się tym, że zapięcie jest bardzo mocne, nieelastyczne, pewne, łatwe i bezpieczne. Bez odblokowania lub uszkodzenia systemu, w zasadzie nie ma możliwości poluzowania go, gwarantuje to o wiele pewniejszą stabilizację, niż jakikolwiek inny znany dzisiaj w branży sposób kompresji ortez.

Dzięki **BOA**[®] **Fit System**, użytkownik ma możliwość stosowania różnego poziomu kompresji w ortezach ortopedycznych, czyli siły ich oddziaływania na ciało pacjenta. Regulacja ta odbywa się w sposób płynny, co zdecydowanie poprawia walory użytkowe wyrobu.

BOA[®] **Fit System** funkcjonuje w oparciu o zespół zróżnicowanych poliamidowych przelotek, linek stalowych pokrytych tworzywem sztucznym oraz szpulowych pokręteł zapadkowych. Dodatkowymi elementami systemu są peloty z funkcją samoszczepną, dzięki którym w łatwy sposób można modyfikować kształt i obwód każdego wyrobu wyposażonego w ten system.

BOA[®] **Fit System**, jest systemem kompresyjnym, i nie należy używać go, do dostosowywania wymiarów ortozy ortopedycznej do obwodów pacjenta. Można go użyć dopiero po prawidłowym dobraniu i założeniu wyrobu na użytkownika.



BOA[®] **Fit System** jest systemem bezobstugowym, nie wymaga serwisowania ani konserwacji.



ul. Piaski 47
36-060 Głogów Małopolski
POLAND

Adres korespondencyjny

ul. Truskawkowa 17, Widna Góra
37-500 Jarosław
POLAND

tel: +48 (016) 621 42 20

tel: +48 (016) 621 41 35

e-mail: biuro@reh4mat.com

www.reh4mat.com • www.probraces.com