




THE BOA®  
**GUARANTEE**

***FAST.  
EFFORTLESS.  
PRECISION FIT.***

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.  
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA  
LUB ETYKIETĄ.

The BOA® Fit System System Kompresyjny

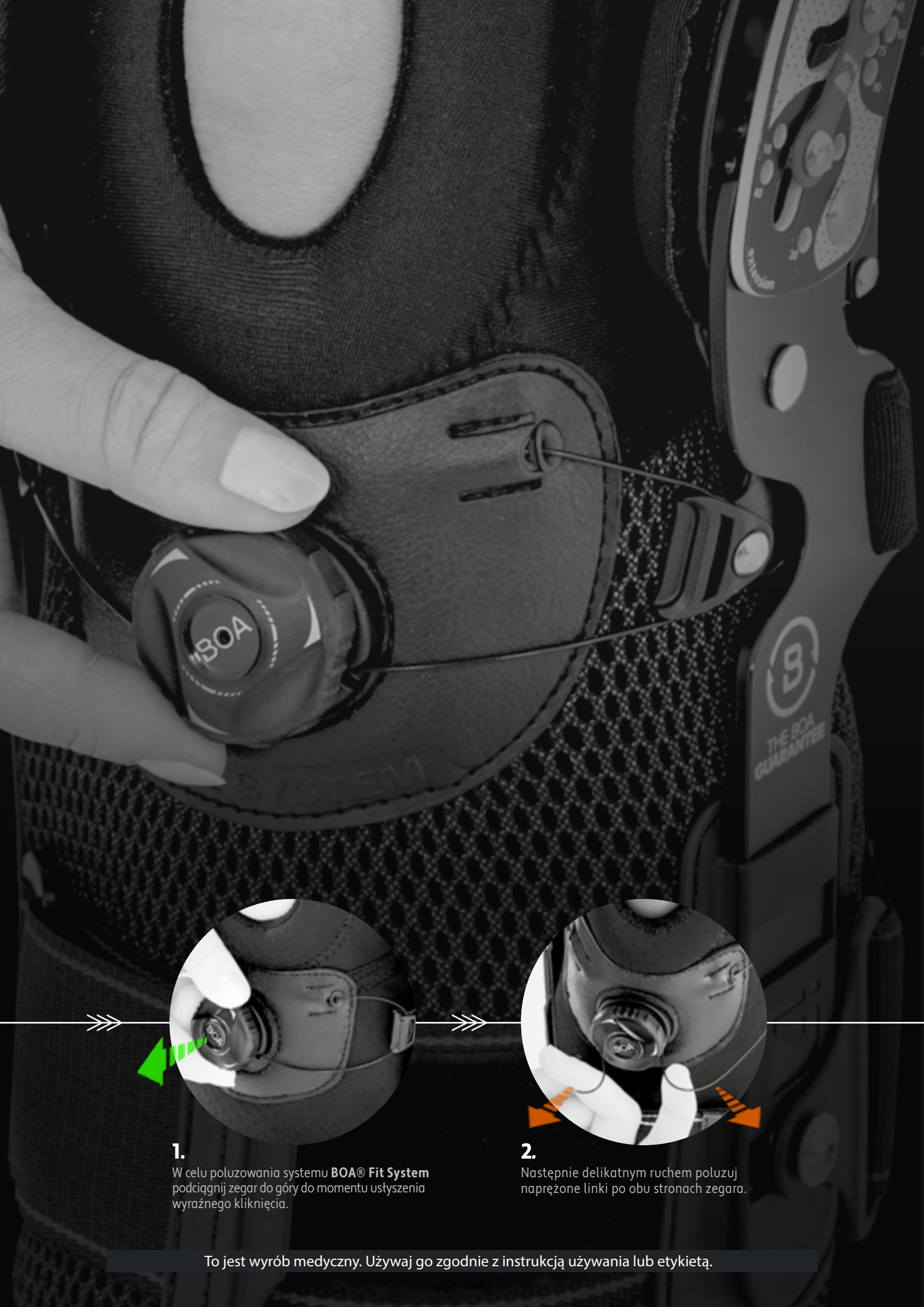

1.

W celu poluzowania systemu **BOA® Fit System** podciągnij zegar do góry do momentu usłyszenia wyraźnego kliknięcia.



2.

Następnie delikatnym ruchem poluzuj naprężone linki po obu stronach zegara.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.




**POŁĄCZENIE** zapewnia lepszą kontrolę nad idealnym dopasowaniem wyrobu do ciała.

**SZYBKOŚĆ** umożliwia szybką aplikację sprzętu, bez względu na warunki.

**MIKRODOPASOWANIE** umożliwia precyzyjne dopasowanie produktu. Poprawia wydajność i komfort - zawsze i wszędzie.

**TRWAŁOŚĆ** zaprojektowany z wysokiej jakości, trwałych materiałów i testowany w terenie **BOA® Fit System** gwarantuje działanie w każdym środowisku.

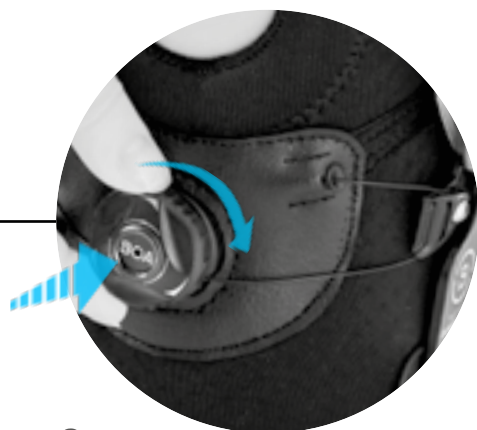

**3.**

W celu napięcia systemu **BOA® Fit System** przekręć zegar zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do uzyskania wymaganego poziomu kompresji wyrobu. W niektórych zegarach napięcie uzyskuje się przekręcając zegar w przeciwną stronę.

W przypadku, gdy w trakcie zakręcania zegara wystąpi opór, a orteza nie osiągnie jeszcze właściwej kompresji, należy zaniechać dalszego zakręcania zegara i wymienić wyrób na mniejszy rozmiar.

### **UWAGA!**

Próba dalszego zakręcania systemu **BOA® Fit System** pomimo oporu, może spowodować TRWAŁE uszkodzenie mechanizmu wyrobu!



## ORTEZY STAWU SKOKOWEGO <<<



Produkt refundowany  
Kod NFZ: J.036.00, J.036.01.

AM-OSS-03/CCA 


Naszą ortezę stabilizującą można stosować zarówno jako zaopatrzenie pourazowe jak i profilaktycznie. Orteza występuje także w wersji dla dorosłych.

### WSKAZANIA

- skręcenia i zwichnięcia stawu skokowego
- nawykowe zwichnięcia stawu skokowego
- doleczenia po unieruchomieniu gipsowym
- uszkodzenie więzadeł i tkanek miękkich stawu skokowego

### ZALETY

- wysoka kompresja
- gwarancja jakości
- innowacyjność
- łatwość zakładania
- stabilizacja

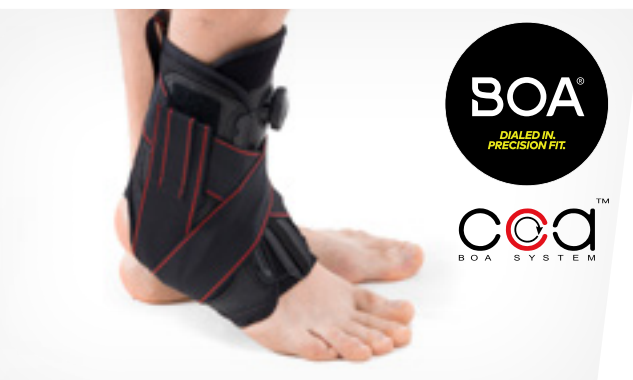

Produkt refundowany  
Kod NFZ: J.036.00, J.036.01.

AM-OSS-03/CCA

Naszą ortezę stabilizującą można stosować zarówno jako zaopatrzenie pourazowe jak i profilaktycznie.

### WSKAZANIA

- skręcenia i zwichnięcia stawu skokowego
- nawykowe zwichnięcia stawu skokowego
- doleczenia po unieruchomieniu gipsowym
- uszkodzenie więzadeł i tkanek miękkich stawu skokowego

### ZALETY

- wysoka kompresja
- gwarancja jakości
- innowacyjność
- łatwość zakładania
- stabilizacja



To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



## AM-OSS-05/CCA

Bestsellerowa orteza kostki **AM-OSS-05/CCA** to kompaktowe rozwiązanie dla stabilizacji stawu skokowego. Bezpieczna i skuteczna.

### WSKAZANIA

- o skręcenia i zwichnięcia stawu skokowego
- o nawykowe zwichnięcia stawu skokowego
- o doleczenia po unieruchomieniu gipsowym
- o uszkodzenie więzadeł i tkanek miękkich stawu skokowego

### ZALETY

- o wysoka kompresja
- o gwarancja jakości
- o innowacyjność
- o łatwość zakładania
- o stabilizacja



ORTEZA STAWU SKOKOWEGO



BOCZNE ANATOMICZNE WZMOCNIENIA



ER



WOLNY OD LATEKSU



INNOWACYJNY



POLECANY PRZEZ SPECJALISTÓW



ÓSEMKOWE PASY KRZYŻOWE



DWUSTRONNOŚĆ



WYRÓB MEDYCZNY KL. I



Produkt refundowany  
Kod NFZ: J.036.00, J.036.01.

## >>> ORTEZY NA OPADAJĄCĄ STOPE

## OSS-OS-02/CCA

Orteza stopy **OSS-OS-02/CCA** pomaga przywrócić utracone funkcje przez aktywne wspomaganie ruchu podnoszenia stopy u osób mających niedowład mięśni prostowników, w szczególności u osób z hemiplegią po udarze mózgu oraz u osób z zaburzeniami i zwyrodnieniami nerwów obwodowych.

### WSKAZANIA

- o niedowład lub osłabienie prostowników stopy
- o stopa wiotka
- o stan po udarze lub wylewie mózgu
- o stwardnienie rozsiane
- o amputacja palców lub przedstopia

### ZALETY

- o wysoka kompresja
- o gwarancja jakości
- o innowacyjność
- o łatwość zakładania
- o stabilizacja



ORTEZA STAWU SKOKOWEGO



OPADAJĄCA STOPA



INNOWACYJNY



SZEROKI ZAKRES REGULACJI



POLECANY PRZEZ SPECJALISTÓW



MINIMUM WYROBU MAXIMUM EFEKTU



WYRÓB MEDYCZNY KL. I



Produkt refundowany  
Kod NFZ: J.036.00, J.036.01.

## AM-OSS-21/CCA

Orteza AM-OSS-21/CCA to doskonały produkt do stosowania w przypadku występowania dolegliwości opadającej stopy. Orteza jest lekka i wygodna. Zapewnia natychmiastowy efekt.

### WSKAZANIA

- o niedowład lub osłabienie prostowników stopy (opadająca stopa)
- o stopa wiotka
- o stan po udarze lub wylewie mózgu
- o stwardnienie rozsiane
- o cukrzyca
- o dystrofia mięśniowa
- o mózgowie porażenie dziecięce (MPD)
- o uraz/zmiazdzenie podudzia

### ZALETY

- o wysoka kompresja
- o gwarancja jakości
- o innowacyjność
- o łatwość zakładania



ORTEZA STAWU SKOKOWEGO



INNOWACYJNY



ROZMIAR UNIWERSALNY



MINIMUM WYROBU MAXIMUM EFEKTU



TRWAŁY



POLECANY PRZEZ SPECJALISTÓW



WYRÓB MEDYCZNY KL. I



To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



## ORTEZY KOŃCZINY DOLNEJ <<<



Produkt refundowany  
Kod NFZ: J.038.00, J.038.01, J.039.00, J.039.01.

### ATOM ACL/CCA

Orteza **ATOM ACL/CCA** stawia opór siłom działającym na koślawe lub szpotawe kolano, a także niweluje negatywny efekt przedniej translacji piszczeli (efekt szuflady). Wyjątkowo mocna przednio-przednia rama ortezy została wykonana z lekkiego lotniczego aluminium.

#### WSKAZANIA

- umiarkowana lub ciężka niestabilność ACL, PCL, MCL i LCL
- rehabilitacja po rekonstrukcji więzadeł ACL lub PCL
- urazy kombinowane ACL/PCL
- przeprost stawu kolanowego
- szpotawość i koślawość kolana

#### ZALETY

- najpewniejsza ochrona kolana
- precyzyjne dopasowanie wyrobu
- wodoodporność
- gwarancja jakości
- innowacyjność



ORTEZA KOLANA



24 TERAPIA



SZYNA ANATOMICZNA 2RA



IDEALNA DLA NARCIARZY



INNOWACYJNY



WODOODPORNY



WYRÓB MEDYCZNY KL. I



Produkt refundowany  
Kod NFZ: J.039.00, J.039.01.

### ACL CCA

Orteza przeznaczona jest do długotrwałego stosowania u pacjentów ze złożonymi niestabilnościami stawu kolanowego (częściowe lub całkowite uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego) będącego następstwem przebytych urazów (w okresie przed i pooperacyjnym).

#### WSKAZANIA

- uszkodzenia więzadła (ACL)
- uszkodzenia więzadeł: LCL, MCL i PCL
- niestabilność boczna kolana
- po rekonstrukcji więzadeł kolana
- po innych zabiegach operacyjnych

#### ZALETY

- wysoka kompresja
- gwarancja jakości
- innowacyjność
- łatwość zakładania



ORTEZA KOLANA



ANATOMICZNY PIERSIEŃ OKOŁORZEPKOWY



ER



INNOWACYJNY



ORTOPEDIA



PRZYJAZNY DLA SKÓRY



SYSTEM 2RA-ACL PRECISION




TRWAŁY



WYRÓB MEDYCZNY KL. I

## ORTEZA KOLANA <<<

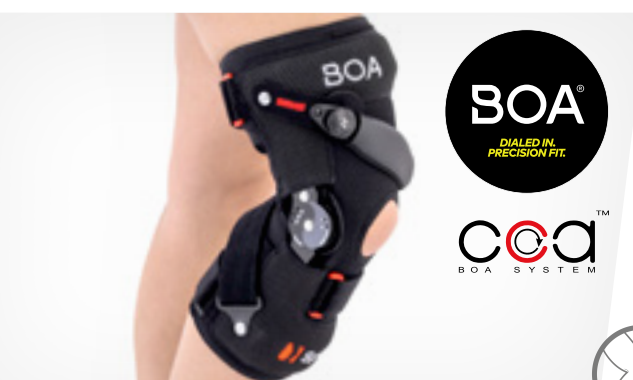

Produkt refundowany  
Kod NFZ: J.038.00, J.038.01.

### SPEEDERO/CCA

Jednoszynowa orteza kolana **SPEEDERO** to lekki, komfortowy produkt, który skutecznie zmniejsza dolegliwości bólowe kolana i pozwala opóźnić w czasie ewentualny zabieg operacyjny.

#### WSKAZANIA

- osteoporoza kolana
- skręcenie stawu kolanowego
- uszkodzenia więzadeł kolana (głównie MCL oraz ACL)
- rekonstrukcja więzadeł kolana
- zwichnięcia stawu kolanowego
- niestabilność boczna kolana
- po innych zabiegach operacyjnych
- jako zabezpieczenie w uprawianiu sportu

#### ZALETY

- 3 punktowy system podparcia
- lekkie i oddychające materiały
- regulacja zakresu ruchomości kolana
- łatwa i szybka aplikacja produktu



ORTEZA KOLANA



ORTOPEDIA



PRZYJAZNY DLA SKÓRY



INNOWACYJNY



SKUTECZNOŚĆ



ORTEZA OA



TRWAŁY



WYRÓB MEDYCZNY KL. I

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



## >>> ORTEZA RĘKI I PRZEDRAMIENIA

### AM-OSN-U-01/CCA

Orteza została wykonana z bardzo mocnych, ale oddychających materiałów, które w miejscach wyjątkowo narażonych na zniszczenie zostały dodatkowo pokryte specjalnie wzmocnioną ekologiczną skórą.

#### WSKAZANIA

- o niestabilność stawu nadgarstkowego
- o jako unieruchomienie po urazie nadgarstka (złamanie, zwichnięcie)
- o profilaktycznie w sporcie

#### ZALETY

- o bardzo mocne i oddychające materiały
- o precyzyjne dopasowanie wyrobu
- o wysoka kompresja
- o gwarancja jakości
- o łatwość zakładania



ORTEZA NADGARSTKA



ANATOMICZNA SZYNA DŁONIOWA



ODDYCHAJĄCY



ALTERNATYWA GIPSU



ZESPÓŁ CIĘŻNI NADGARSTKA



INNOWACYJNY



WOLNY OD LATEKSU



WYRÓB MEDYCZNY KL. I



Produkt refundowany

Kod NFZ: L.047.00, L.047.01, L.048.00, L.048.01.

## >>> UNIWERSALNA ORTEZA ŁOKCIA

### AM-SL-01/CCA

Sprawdzona i skuteczna forma terapii łokcia tenisisty i golfisty. Odciąga przyczepy mięśni i zmniejsza stan zapalny. Polecana przez Wiktora Chabela – olimpijczyka z Rio 2016.

#### WSKAZANIA

- o łokieć tenisisty
- o łokieć golfisty

#### ZALETY

- o wysoka kompresja
- o gwarancja jakości
- o innowacyjność
- o łatwość zakładania



ŁOKIEĆ TENISISTY/GOLFISTY



CCA



WYRÓB MEDYCZNY KL. I



DWUSTRONNOŚĆ



SKUTECZNOŚĆ



INNOWACYJNY



DYSKRECJA




PEŁOTA SILIKONOWA



ROZMIAR UNIWERSALNY



To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

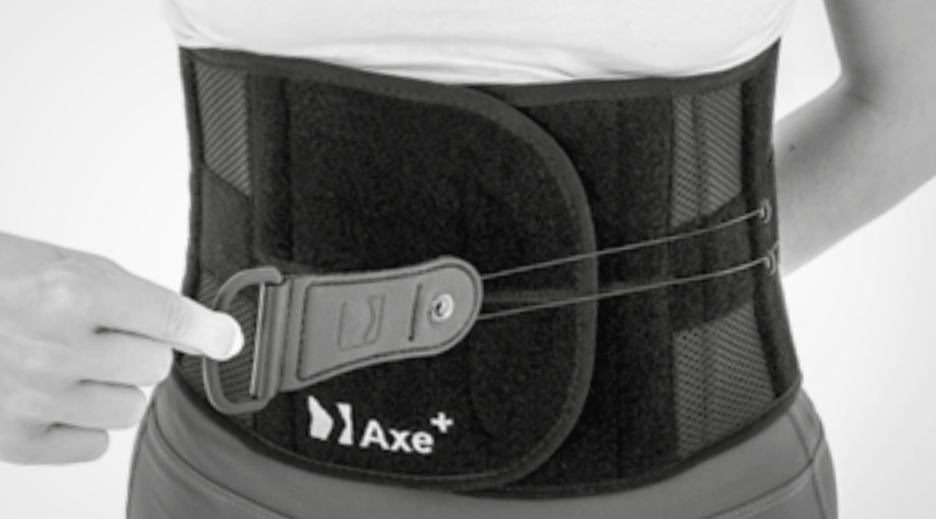

## ORTEZY LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWE <<<



**cca**  
BOA SYSTEM

Produkt refundowany  
Kod NFZ: M.060.00, M.060.01.

### AS-LK-02/CCA

Pas sportowy **AXE** ma na celu odciążenie i stabilizację odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa oraz zabezpieczenie mięśni i więzadeł przed skręceniem. Produkt rekomendowany przez zespół futbolu amerykańskiego Rzeszów Rockets.

#### WSKAZANIA

- o po naderwaniu mięśni brzucha i grzbietu
- o u osób ze słabymi mięśniami brzucha
- o w przewlekłych zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowego

#### ZALETY

- o wysoka kompresja
- o gwarancja jakości
- o innowacyjność
- o łatwość zakładania



L50



ODDYCHAJĄCY



SZEROKI ZAKRES REGULACJI



INNOWACYJNY



WOLNY OD LATEKSU



WYRÓB MEDYCZNY KL. I



**cca**  
BOA SYSTEM

Produkt refundowany  
Kod NFZ: M.059.00, M.059.01.

### AR-WSP-03/CCA

Orteza **AXE+** stabilizuje odcinek lędźwiowo-krzyżowy kręgosłupa oraz wzmacnia ścianę mięśni brzucha. Poprzez utrzymywanie stabilnej temperatury i elastyczny ucisk łagodzi dolegliwości bólowe spowodowane przeciążeniem, przebytymi urazami i zmianami zwyrodnieniowymi.

#### WSKAZANIA

- o naderwanie mięśni brzucha i grzbietu spowodowanym urazem lub przeciążeniem
- o przy słabych mięśniach brzucha, pracach fizycznych i aktywnościach fizycznych
- o w przewlekłych zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowego

#### ZALETY

- o wysoka kompresja
- o gwarancja jakości
- o innowacyjność
- o łatwość zakładania
- o stabilizacja



L50



ODDYCHAJĄCY



SZEROKI ZAKRES REGULACJI



INNOWACYJNY




WOLNY OD LATEKSU



WYRÓB MEDYCZNY KL. I

## ORTEZA KRZYŻOWO-BIODROWA <<<

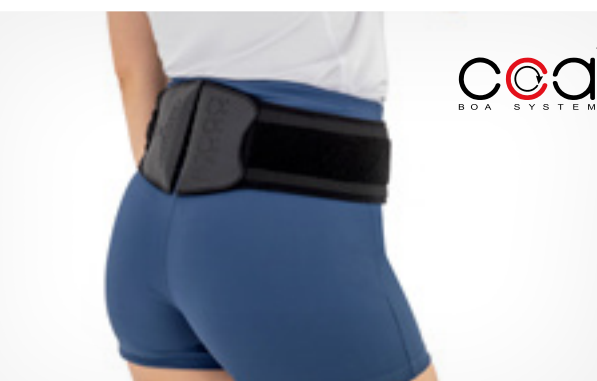

**cca**  
BOA SYSTEM

Produkt refundowany  
Kod NFZ: M.058.00, M.058.01.

### AM-OK/CCA

Doskonałym rozwiązaniem profilaktycznym oraz zmniejszającym dolegliwości bólowe jest nasza orteza **AM-OK/CCA**, która poprzez zastosowanie innowacyjnego systemu kompresyjnego **CCA**, pozycjonuje i doskonale odciąża stawy krzyżowo-biodrowe.

#### WSKAZANIA

- o artroza stawu krzyżowo-biodrowego
- o zespół stawu krzyżowo-biodrowego
- o niestabilności stawu krzyżowo-biodrowego
- o blokady stawu krzyżowo-biodrowego
- o profilaktyka

#### ZALETY

- o wysoka kompresja
- o gwarancja jakości
- o innowacyjność
- o łatwość zakładania
- o stabilizacja



L50



ODDYCHAJĄCY



SZEROKI ZAKRES REGULACJI



INNOWACYJNY



WOLNY OD LATEKSU



WYRÓB MEDYCZNY KL. I

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



## >>> ORTEZA KORYGUJĄCA SKOLIOZĘ

**SCOLIOR** **4kids** MEDICAL DEVICES

Orteza kręgosłupa **SCOLIOR™** składa się z 3 półsztywnych pelot, wyposażonych w profesjonalny system kompresyjny **BOA® Fit System** oraz system taśm korekcyjnych.

### WSKAZANIA

- korekcja ustawienia kręgosłupa w sposób bierny
- bierna korekcja bocznych skrzywień kręgosłupa
- optymalizacja napięć mięśniowych
- zmniejsza i zatrzymuje progresję skoliozy

### WSKAZANIA

- długotrwała terapia
- indywidualna kompresja
- skuteczność



ORTEZA TUŁOWIA



ORTOPEDIA



INNOWACYJNY



TRWAŁY



MINIMUM DEVICE  
MAXIMUM EFFECT



SZEROKI ZAKRES  
REGULACJI



DYSKRECJA



WYRÓB  
MEDYCZNY KL. I



## BOA® Fit System

System charakteryzuje się tym, że zapięcie jest bardzo mocne, nieelastyczne, pewne, łatwe i bezpieczne. Bez odblokowania lub uszkodzenia systemu, w zasadzie nie ma możliwości poluzowania go, gwarantuje to o wiele pewniejszą stabilizację, niż jakikolwiek inny znany dzisiaj w branży sposób kompresji ortez.

Dzięki **BOA® Fit System**, użytkownik ma możliwość stosowania różnego poziomu kompresji w ortezach ortopedycznych, czyli siły ich oddziaływania na ciało pacjenta. Regulacja ta odbywa się w sposób płynny, co zdecydowanie poprawia walory użytkowe wyrobu.

**BOA® Fit System** funkcjonuje w oparciu o zespół zróżnicowanych poliamidowych przelotek, linek stalowych pokrytych tworzywem sztucznym oraz szpulowych pokręteł zapadkowych. Dodatkowymi elementami systemu są peloty z funkcją samoszczepną, dzięki którym w łatwy sposób można modyfikować kształt i obwód każdego wyrobu wyposażonego w ten system.

**BOA® Fit System**, jest systemem kompresyjnym, i nie należy używać go, do dostosowywania wymiarów ortozy ortopedycznej do obwodów pacjenta. Można go użyć dopiero po prawidłowym dobraniu i założeniu wyrobu na użytkownika.



**BOA® Fit System** jest systemem bezobstugowym, nie wymaga serwisowania ani konserwacji.



ul. Piaski 47  
36-060 Głogów Małopolski  
POLAND

**Adres korespondencyjny**

ul. Truskawkowa 17, Widna Góra  
37-500 Jarosław  
POLAND

tel: +48 (016) 621 42 20

tel: +48 (016) 621 41 35

e-mail: [biuro@reh4mat.com](mailto:biuro@reh4mat.com)

[www.reh4mat.com](http://www.reh4mat.com) • [www.probraces.com](http://www.probraces.com)