


KOD KATALOGOWY	AM-SB-12
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA BIODRA
MODEL	AM-SB-12
CODE	AM-SB-12
TRADE NAME	HIP ORTHOSIS
MODEL	AM-SB-12


1. PL: Przed założeniem ortozy na kończynę, zegar powinien być ustawiony w określonym przez lekarza prowadzącego zakresie ruchomości stawu biodrowego.

EN: Before putting the brace on the limb, the drop lock should be set within the range of hip mobility specified by the doctor or physiotherapist.

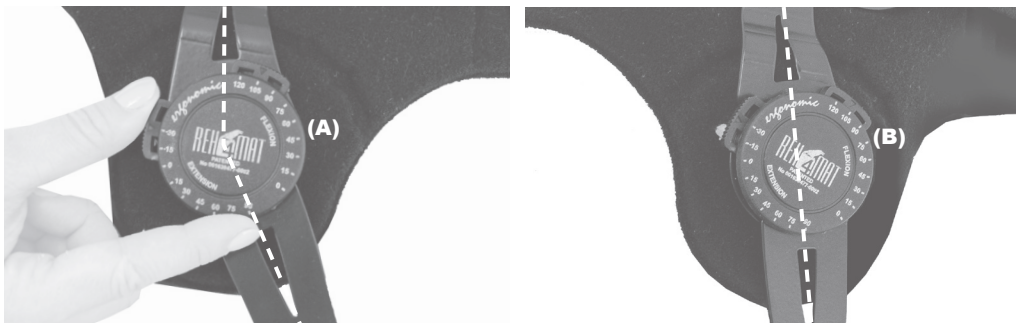

(A) ZGIĘCIE
(A) FLEXION

(B) WYPROST
(B) EXTENSION

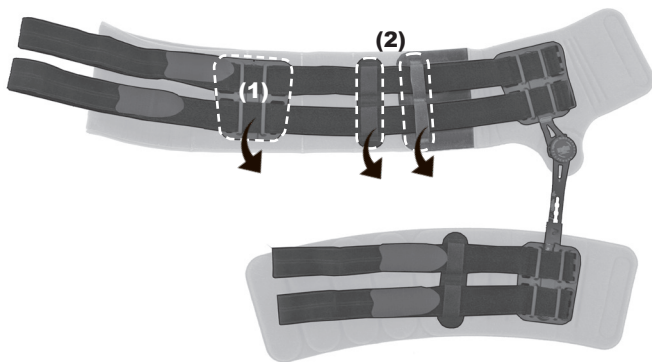

2. PL: Przed założeniem ortozy, należy odpiąć pas z pelotą (1) i przelotkami (2) z elementu biodrowego.

EN: Before putting on the brace, unfasten the belt with the pad (1) and the guides (2) from the hip belt.



3. PL: Przyłóż ortezę do nogi w taki sposób, aby zegar (3) znajdował się na wysokości krętarza większego kości udowej.

EN: Place the brace on the leg, so that the drop lock (3) is at the height of the greater trochanter of femur.





4. PL: Ustaw odpowiedni obwód elementu biodrowego. Zapnij ortezę z przodu na rzep (4).

EN: Set the correct circumference of the hip belt. Close the brace at the front with the Velcro fastener (4).




5. PL: Odepnij element (5) i dopasuj długość pasa biodrowego (6). Jeżeli istnieje potrzeba odetnij zbędną długość pasa (7).

EN: Detach the element (5) and adjust the length of the hip belt (6). If necessary, cut off the excess length of the belt (7).

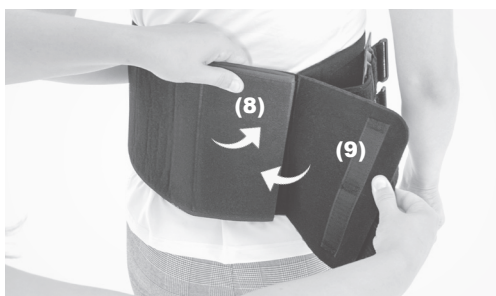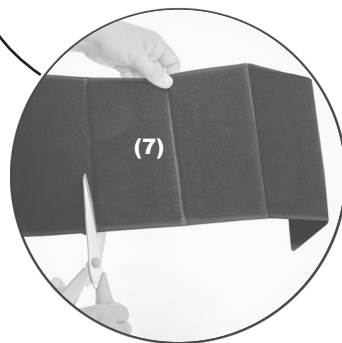


6. PL: Przypnij pas (8) i zapnij element (9).

EN: Attach the belt (8) and fasten the element (9).

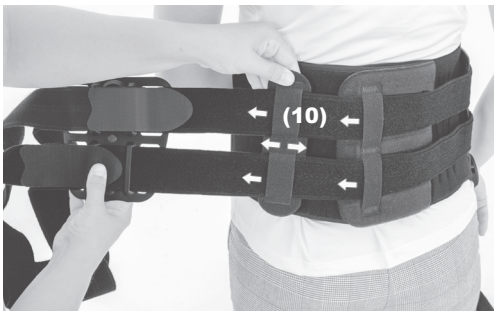

7. PL: Przytnij przelotkę (10) w odpowiednim miejscu na pasie biodrowym.

EN: Attach the guide (10) into the appropriate place on the hip belt.

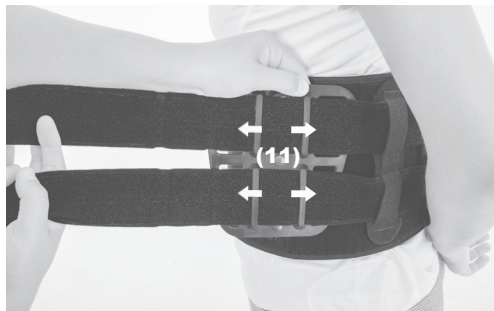


8. PL: Do pasa biodrowego przypnij pelotę (11) równoległe do peloty z szyną znajdującą się z przeciwnej strony pasa.

EN: Attach the pad (11) to the hip belt parallel to the pad with the splint on the opposite side of the belt.





9. PL: Przytnij przelotkę (12) z przodu w odpowiednim miejscu.

EN: Attach the guide (12) at the front.

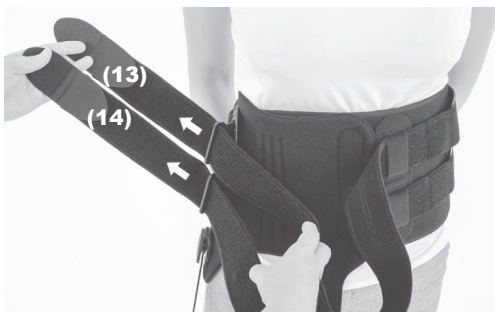

10. PL: Przepleć taśmy (13,14) przez klamery i zapnij na rzepy (15). Jeżeli istnieje potrzeba, odetnij zbędną długość pasów.



EN: Interlace (13,14) through the buckles and fasten with Velcro (15). If necessary, cut the unnecessary length of the straps.

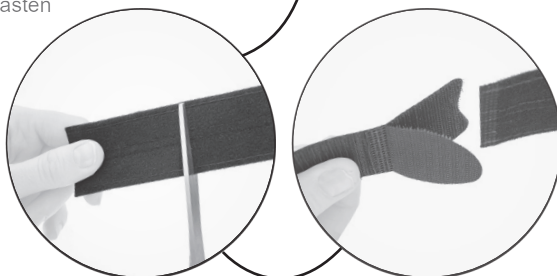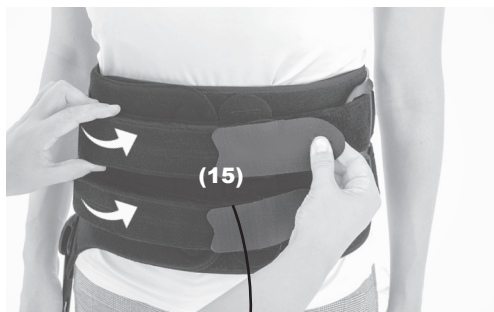

- 11. PL:** Ustaw odpowiednią wysokość peloty udowej przy pomocy regulatora PRESSLIDE (16).
EN: Set the appropriate height of the thigh support with the PRESSLIDE regulator (16).



- 12. PL:** Odepnij przelotkę (17) z taśmami i dopasuj obwód opaski udowej do uda (18).
EN: Unfasten the guide (17) with the straps and adjust the circumference of the thigh strap (18).

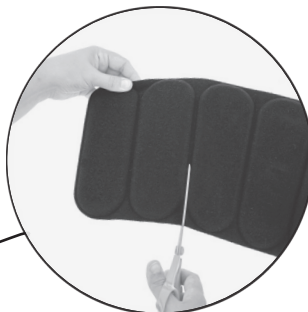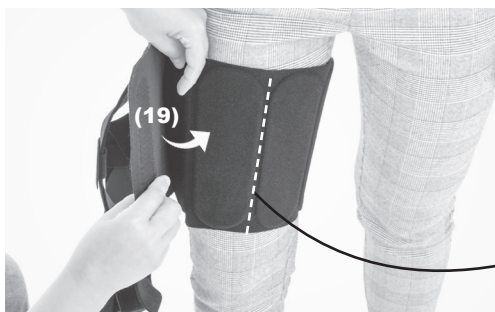

- 13. PL:** Zapnij opaskę udową na rzep (19). Jeżeli istnieje potrzeba, odetnij zbędną długość opaski.
EN: Fasten the thigh belt with the Velcro fastener (19). If necessary, cut off the excess length.





- 14. PL:** Przypnij przelotkę (20) do opaski udowej.
EN: Attach guide the eyelet (20) to thigh strap.



15. PL: Przepleć pasy (21,22) przez klamki i zapnij na rzepy (23).

Jeżeli istnieje potrzeba, odetnij zbędną długość pasów.

EN: Thread the straps (21,22) through the buckles and fasten with Velcro (23). If necessary, cut off the excess length of the straps.

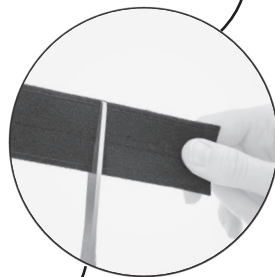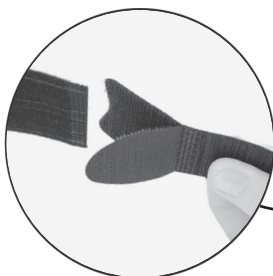

16. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.